



OPEROLL

Die aufblasbare Mehrweg-Lagerungsrolle für die präzise
Positionierung des Patienten im OP




OPEROLL - DIE AUFBLASBARE MEHRWEG-LAGERUNGSRÖLLE

EIN MUSS IN JEDEM OPERATIONSSAAL

Bei manchen Eingriffen stoßen selbst die modernsten OP-Tische an ihre Grenzen, wenn es darum geht, den Tisch so einzustellen, dass der Operateur nicht nur **freies Sichtfeld** hat, sondern der Patient gleichermaßen auch **physisch korrekt gelagert** ist.

Genau für diesen Fall ist die Produkt-Neuheit Operoll der perfekte Begleiter: diese **universell einsetzbare, mehrfach verwendbare aufblasbare Positionierungsrolle** wird dabei an entsprechender Stelle unter dem Patienten in entlüfteter Form positioniert, belüftet und bringt den Patienten so stufenlos in den gewünschten Neigungswinkel. Dieser kann **durch Be- und Entlüften** jederzeit **der Situation angepasst** werden.

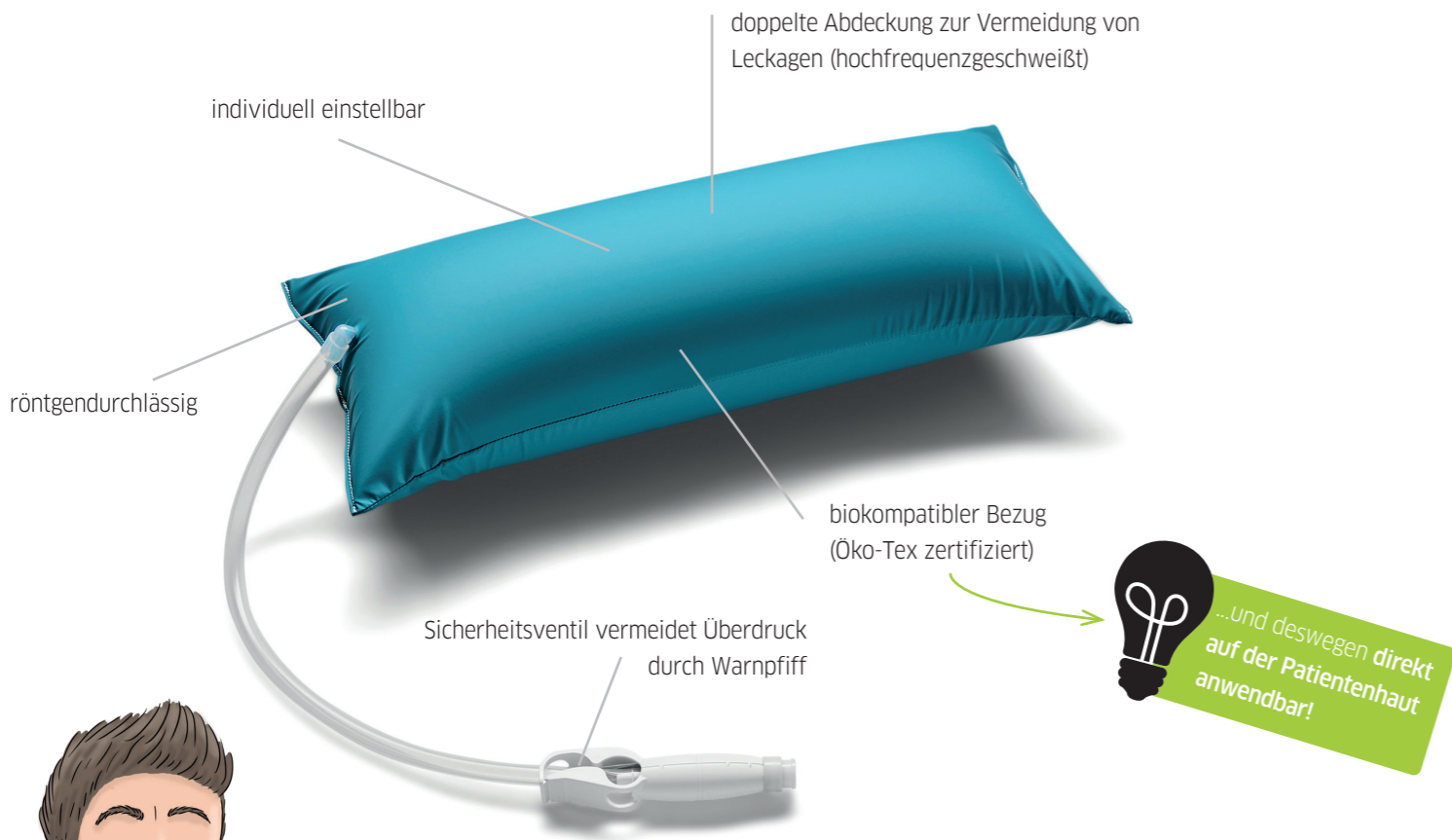


...außerdem ist die Operoll **mega anwenderfreundlich!** Denn die Druckluft **übernimmt den kompletten Kraftaufwand.** Endlich ergonomisch Arbeiten!



OPEROLL


MATERIAL	biokompatibler Bezug, Ventil aus ABS
ABMESSUNGEN	58 x Ø 18 cm
FARBE	petrol
GEEIGNET FÜR	bis zu 1.000 Aufblaszyklen
BESTELLMENGE	1 VE = 2 Stück
ART.-NR.	99264

Die Operoll ist **der perfekte Begleiter für die unterschiedlichsten Eingriffe:**

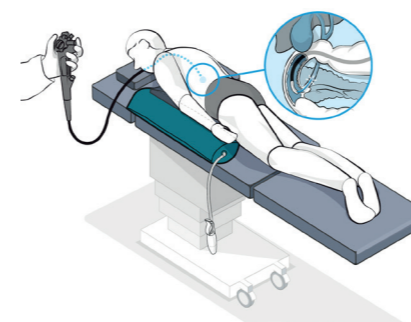


Seitenlage während eines ERCP-Eingriffes

Für den meist ambulant durchgeführten ERCP-Eingriff an Gallengang, Bauchspeicheldrüse und Co. wird der Patient in Seitenlage positioniert. Die Operoll bringt den Patienten dabei präzise in den gewünschten Neigungswinkel - und das von nur einer Person. Hier steht vor allem auch die physische Entlastung des umlagernden Personals im Vordergrund, denn die Druckluft übernimmt hier den gesamten Kraftakt.

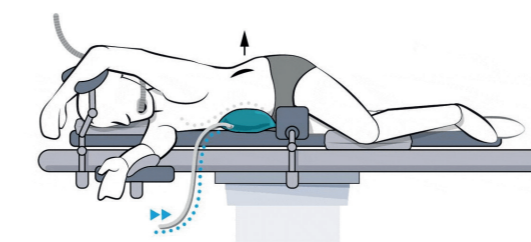


Seitenlage (AAA-Verfahren)

Die häufigste Anwendung der Operoll ist die Seitenlage. Sie platzieren die Operoll unter dem Patienten in Seitenlage in Höhe der Niere und belüften sie während des Eingriffs, um freie Sicht zum Operationsfeld (Niere) zu erhalten. Diese Anwendung ist gemeinhin als „Nierenknick“ bekannt.

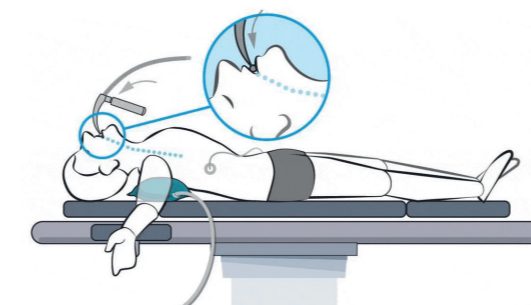


Intubation

Manchmal ist es gar nicht so einfach, den Tubus in die Luftröhre einzuführen. Vor allem wenn der Patient einen hohen BMI hat. Ein kurzer oder wenig beweglicher Hals, ein kleiner Unterkiefer oder eine schmale Mundöffnung können ebenfalls Gründe sein, warum die Intubation schwierig ist. Mit der Operoll kann die ideale Position für jeden Patienten mittels individueller Be- und Endlüftung eingestellt werden.

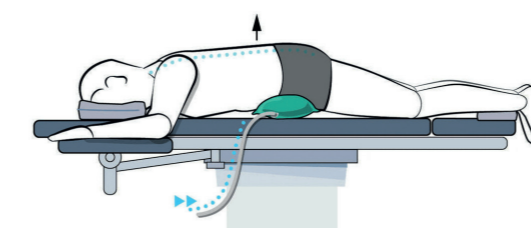

Epiduralanästhesie und Schmerztherapie in Bauchlage

Die schmerzfreie Zugänglichkeit des Epiduralraums ist eine Herausforderung. Für eine optimale Behandlung muss die Lendenwirbelsäule delordosiert werden. Die Operoll hilft dabei, den Patienten in die richtige Position dafür zu bringen. Die Operoll wird in Bauchlage auf Höhe des Beckenkamms unter den Patienten gelegt. Wenn die Operoll aufgeblasen wird, wird das Hohlkreuz des Patienten aufgerichtet, wodurch ein breiteres interlaminares Fenster entsteht, das ideal für die Behandlung ist.

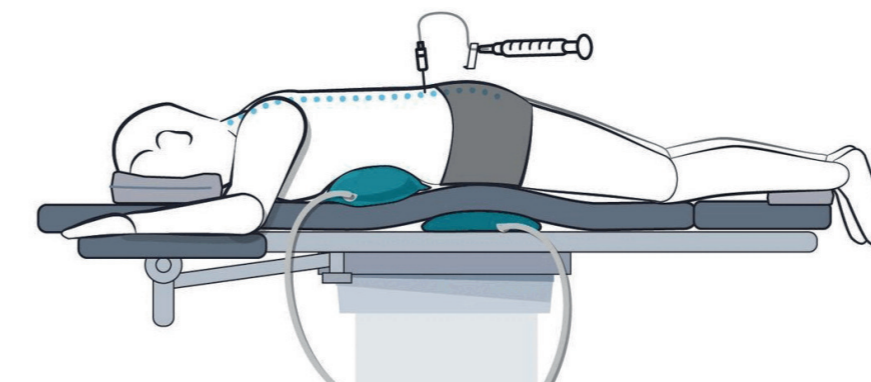

Für **Anwendungsvideos** und **weitere Infos** schauen Sie gerne mal hier vorbei:



ZISK

OPEROLL MEHRWEG-LAGERUNGSROLLE

DAS PASST DAZU. UNSER ZUBEHÖR:




Bumblebee-Druckluftpistole (Art.-Nr. 99277)
mit passendem Aufsatz für die Operoll



Druckluftschlauch (Art.-Nr. 98396)
5 Meter lang, mit Gasentnahmestecker für Zentralversorgung

ACH ÜBRIGENS, KENNEN SIE EIGENTLICH...?

...die druckentlastende Druckluftauflage **Morphemat?**

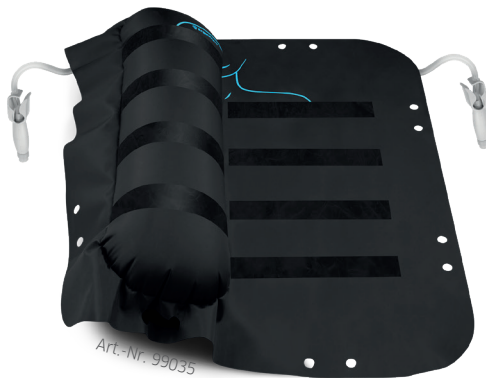

- ✓ geeignet für die Lagerung bis 40° Neigung
- ✓ verwendbar für bis zu 1.000 Aufblaszyklen
- ✓ ideal für die Wechsellagerung auf Intensivstation
- ✓ anwendbar für Patienten bis zu 180 kg

...oder die Umlagerungshilfe **IBO Inflatable Board?**

- ✓ für die Umlagerung von der Rücken- in die Bauchlage
- ✓ verwendbar für 50 Anwendungen
- ✓ anwendbar für Patienten bis zu 150 kg



**Sie haben Fragen oder würden gerne mehr erfahren?
Wir helfen Ihnen gerne. Sprechen Sie uns an!**

Im Vertrieb durch:

nordiska 
helping people care

Victoria Höhe 1 • 51645 Gummersbach
T: 0 22 61/98 91 0 • F: 0 22 61/98 91 111
www.nordiska.de • info@nordiska.de

© 2023 nordiska GmbH & Co. KG.
Konstruktions- und/oder fertigungsbedingt unvermeidbare
oder erforderliche Änderungen sowie Irrtümer und Druck-
fehler behalten wir uns auch ohne vorherige Information
ausdrücklich vor.