


RÖNTGENSCHUTZ FRAGEBOGEN

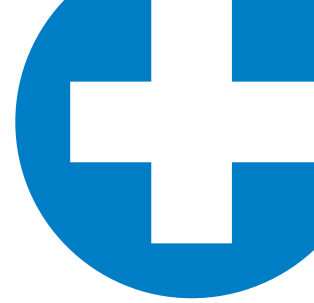

1. Wo werden die Röntgenschutzprodukte produziert?

Die Produktion befindet sich in der Schweiz

2. Wie lange ist die Lieferzeit?

5-6 Wochen je nach Auftragslage

3. Wo befindet sich das Lager?

Die Produkte werden ab Lager Gummersbach geliefert, jedoch meist Auftragsbezogen produziert, da es sich um Sonderanfertigungen handelt

4. Welche Bleichgleichwerte bieten Sie an?

0,25mm, 0,35mm und 0,5mm

5. Welche Schutzmaterialien bieten Sie an?

Standard (Blei) / X-Light (aus Bleivinyll, Stanum und Bismuth) / Leadfree (Bismuth und Antimon)

6. Gibt es Prüfprotokolle/Zertifikate zum Bleifreien Material?

Ja, siehe Downloadbereich

7. Welche Reinigungsmittel können Sie empfehlen?

Planacid AH10788 direkt vom Hersteller der Röntgenschutzprodukte oder gem. VAH Liste

8. Welche Verschlussmöglichkeiten gibt es?


Klettverschluss oder Magnet (Magnet nur für Schilddrüsenschutz, Mantelschürze und Tops)

9. Gibt es verschiedene Modelle?

Frontschürzen, Top+Rock, Mantelschürze, Schilddrüsenschutz, Kopfschutz, Augenschutz, sterile Handschuhe etc.

10. Gibt es Zertifikate zu den verschiedenen Materialien/Produkten?

Ja, siehe Downloadbereich

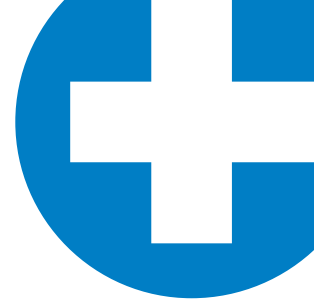

11. Ist ein kompletter Verschluss zum vollständigen Schutz notwendig?

Nicht nötig durch die Überlappung des Schutzmaterials

12. Existiert eine Preisliste?

Durch die verschiedenen Sonderanfertigungsmöglichkeiten erstellen wir individuelle Angebote

13. Ist eine Personalisierung möglich?

Ja, durch Motiv-Aufnäher, Logo oder Monogramm aufgestickt, Logo oder Monogramm als Klettaufnäher, Transparente Einstecktasche für ein Namensschild

14. Gibt es verschiedene Größen des Schilddrüsenschutz?

Es existiert eine Einheitsgröße, aber ohne Aufpreis besteht die Möglichkeit einer Verschlussverlängerung (beidseitig 50mm)

15. Gibt es die Möglichkeit den Schilddrüsenschutz an der Schürze zu befestigen?

Ja, mit einem Band (nicht abnehmbar) oder mit einem Druckknopf (abnehmbar)

16. Ist ein Schutz bis 150 kV gewährleistet?

Ja

17. Welches Zubehör ist möglich?

Zu den Mantelschürzen und Tops kann ein Ärmel dazu bestellt werden. Modell KARD (Top und Mantel müssen dann im Vorfeld mit KARD bestellt werden, sodass sie die entsprechenden Druckknöpfe haben)

18. Ist eine persönliche Beratung möglich?


Wir kommen sehr gerne persönlich vorbei

19. Haben Sie auch Schutzbrillen im Sortiment?

Wir haben verschiedene Modelle mit einem Bleigleichwert von 0,75mm im Sortiment, sowie eine flexibel einstellbare Überbrille

20. Sind Sonderanfertigungen möglich?

Sondermaße sind auf Anfrage möglich (Länge, Breite)

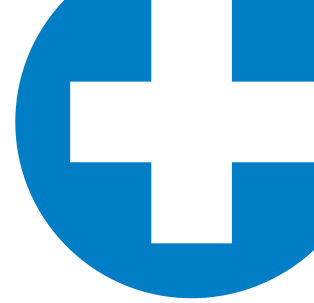

21. Hat jede Schürze eine eigene Seriennummer?

Ja, sie verfügen zudem über einen RFID-Chip zur optimalen Prüfung

22. Existiert dazu eine Software?

Für die Lesbarkeit der RFID-Chips bieten wir ein Lesegerät, sowie eine speziell angefertigte Software

23. Sind Reparaturen möglich?

Ja, sind sie

24. Gibt es eine Herstellergarantie?

Ja, 2 Jahre, ausgenommen unsachgemäße Behandlung

25. Gibt es kühlendes Innenmaterial?

Leider nein. Eine Temperatenausgleichende Innenschicht bieten wir nicht an. Denn dies wird durch Textilien gemacht, welche mit Paraffin Einschlüssen hergestellt wird. Dies funktioniert so, dass es nur eine kühlende Wirkung hat, bis sich das Paraffin durch die Körpertemperatur verflüssigt hat. Dies dauert ca. 15-20 min dann aber wirkt es als Isolation und man schwitzt noch mehr.

26. Wie sind die Gewichtsunterschiede bei den drei Materialien?

Standard: 0.25 Pb = 3.4 Kg / m²
Standard 0.35 Pb = 4.6 Kg / m²
X-Light 0.25 Pb = 2.9 Kg / m²
X-Light 0.35 Pb = 4.1 Kg / m²
Leadfree 0.25 Pb = 2.6 Kg / m²
Leadfree 0.35 Pb = 3.7 Kg / m²

27. Wie sind die Gewichtsunterschiede z.B. bei einem Top und Jupe?

PB 0.35 / 0.25
Top M x60 Standard 2950 gr
Top M x60 X-Light 2720 gr
Top M x60 Leadfree 2380 gr

Jup M x60 Standard 3260 gr.
Jup M x60 X-Light 3010 gr.
Jup M x60 Leadfree 2700 gr.

