



## TOURNIQUET

Das elektronische Blutsperr-System



# nordiska<sup>+</sup>

helping people care

## 6 GUTE GRÜNDE FÜR NORDISKA:

- 1 nordiska ist Ihr Spezialist für intelligente und innovative Arbeitserleichterungen, Hilfsmittel und Funktionsmöbel im Bereich Gesundheitseinrichtungen.
- 2 Wir legen größten Wert auf die persönliche Betreuung unserer Kunden. Denn nur so können wir individuell auf Ihre Ideen und Bedürfnisse eingehen.
- 3 Dank unseres großen Lagerbestandes bekommen Sie schnell und zuverlässig die benötigten Produkte - auch kurzfristig.
- 4 Tausende Ärzte, Schwestern und Pfleger vertrauen in über 24 Ländern täglich auf uns und unsere Produkte. Wir beraten Sie kompetent und stehen mit Rat und Tat zur Seite.
- 5 Mit Produkten von nordiska sparen Sie vor allem Zeit und Kraft. Ihr Job wird einfach einfacher und sicherer. Davon profitieren nicht nur Sie, sondern auch Ihre Patienten.
- 6 Wir möchten helfen. Deshalb unterstützen wir verschiedene gemeinnützige Vereine und Organisationen, um Leid zu lindern und vielen Menschen das Leben zu erleichtern.

## Full-Service aus einer Hand

Bei uns sind Sie gut aufgehoben! Ob bei Produkthanfragen, Einweisungen oder Servicefragen - unsere erfahrenen Berater und Servicetechniker besuchen Sie auch gerne persönlich vor Ort.

## Zuverlässige Direktlieferung


Frachtfreie Lieferung ab € 500 - direkt zum Verwendungsort. Nennen Sie uns einfach Ihre Lieferwünsche. Ob mit Spedition, Paketdienst oder eigenem Fuhrpark - Ihre Ware erhalten Sie auf dem schnellsten Weg!

## Vielfältige Zusammenarbeit

Egal ob Sie direkt aus dem Krankenhaus oder einer Praxis kommen oder ob Sie als Architekt oder Bauplaner tätig sind, unsere Partner sind vielfältig. So haben auch Sie immer den richtigen Partner an Ihrer Seite.

## TOURNIQUET SYSTEM

### DIE SICHERE VARIANTE FÜR EIN BLUTLEERES OPERATIONSFELD

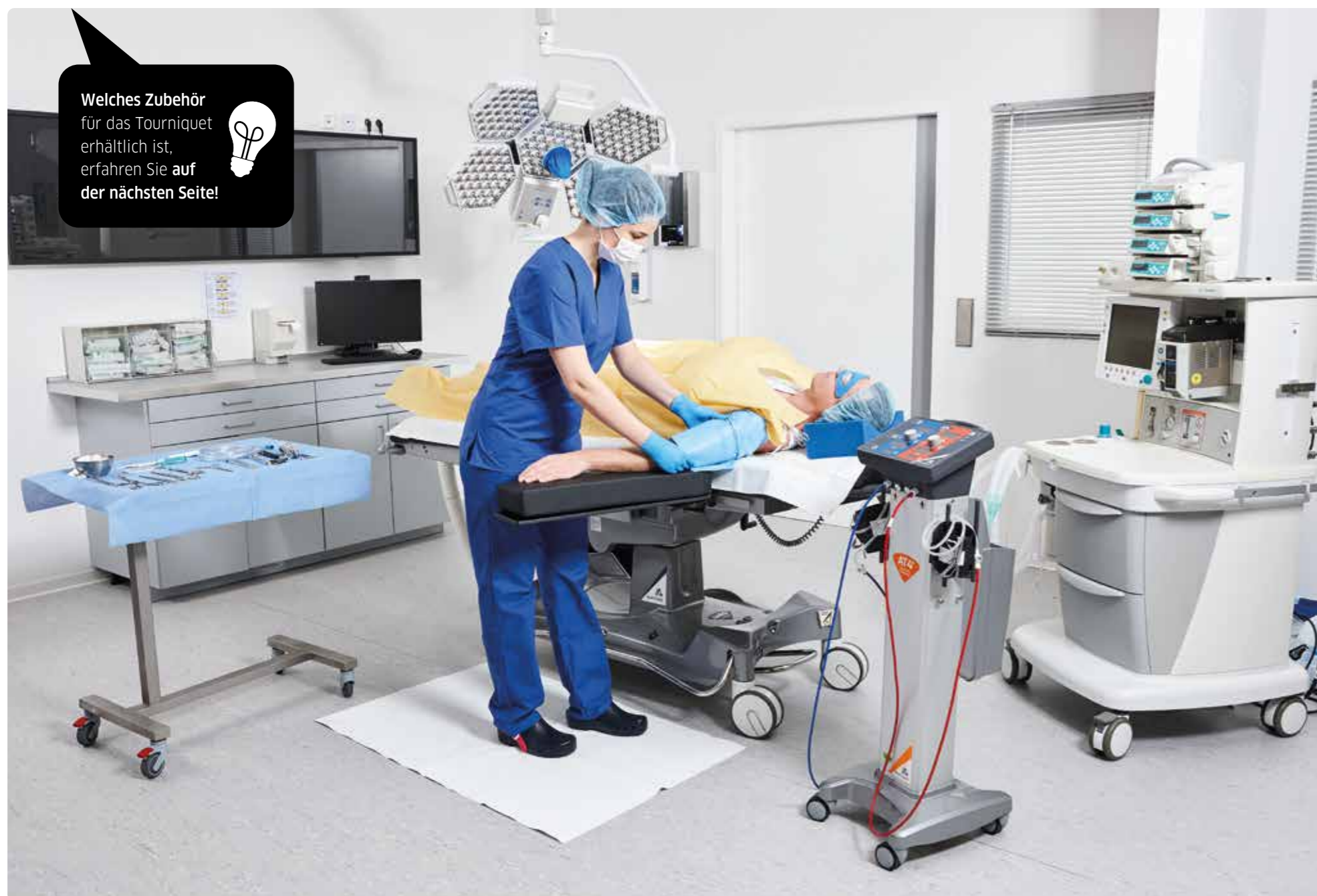

Welches Zubehör für das Tourniquet erhältlich ist, erfahren Sie auf der nächsten Seite!



Das **Tourniquet** ist ein **elektronisches Blutsperr-System**, welches mit fortschrittlicher Technologie in kurzer Zeit für ein blutleeres Operationsfeld sorgt. Die kompakte Bauweise ist extrem leicht und dennoch robust und bietet maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit. Durch die integrierte elektronische Luftzufuhr werden keine externen Druckquellen benötigt, somit ist es besonders geräuscharm. Das Gerät ist extrem stromsparend - der Akku hält bis zu 24 Stunden und gewährleistet damit vollkommen unabhängige Funktionsfähigkeit über den kompletten Tag verteilt. Es verfügt über eine intelligente Leck-Kompensationsfunktion sowie eine automatische Selbstdiagnoseprüfung, die das Gerät sowohl bei Inbetriebnahme kalibriert, als auch während des gesamten Betriebes den Druck stetig überprüft und gleichmäßig aufrecht erhält. Alle Daten des Eingriffs werden auf einer Festplatte im System gespeichert und sind jederzeit abrufbar. Das bietet maximale Rechtssicherheit.

Das praktische, farblich kinderleicht voneinander unterscheidbare Zwei-Kanal-System kann je nach Anforderung ein- oder zweikanalig verwendet werden. Somit können Sie den Vorgang der Blutsperre nicht nur an einer Stelle, sondern direkt an zweierlei Positionen durchführen.

- ✓ mit **IVRA (Bier's Block Funktion)**
- ✓ **optisches** und **akustisches Warnsignal**
- ✓ farblich gekennzeichnetes **Zwei-Kanal-System**
- ✓ automatische **Selbstdiagnoseprüfung**
- ✓ **Rechtssicherheit** dank zuverlässiger Datenspeicherung auf Festplatte

#### TECHNISCHE DATEN UND ABMESSUNGEN

<b>Gesamtabmessungen:</b>	350 x 385 x 1.055 mm (BxTxH)
<b>Maße Display:</b>	275 x 205 mm
<b>Gewicht:</b>	17,3 kg
<b>Netzspannung:</b>	230 V
<b>Frequenz:</b>	50 - 60 Hz
<b>Max. Manschettendruck:</b>	600 mmHg

#### STANDARDMÄSSIG ENTHALTEN:

- Tourniquet-System
- farblich gekennzeichnetes Zwei-Kanal-System (blau und rot)
- Ablagekorb (an Rückseite montiert)
- 2 x Zweier-Haken (links und rechts)
- Stromanschlusskabel


#### AUSFÜHRUNGEN

**TOURNIQUET ELEKTRONISCH**

ART.-NR.

98330

## RHYS DAVIES ROLL MANSCHETTE

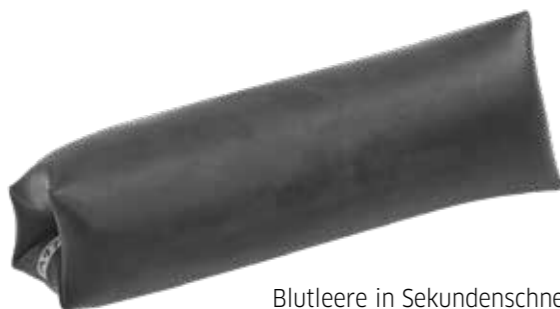

Blutleere in Sekundenschnelle

ENTHALTEN	Maßband und Pumpe
MATERIAL	Naturkautschuk
ABMESSUNGEN	470 mm Durchmesser, 457 mm Länge
BESTELLMENGE	1 VE = 1 Stück
ART.-NR.	<b>91302</b>

## MANSCHETTENABDECKUNGEN



MATERIAL	Vlies mit Viskose-Polyethylen- Beschichtung
EIGENSCHAFTEN	hypoallergen, wasserdicht
ABMESSUNGEN	52 x 43 cm (Größe S) 78 x 43 cm (Größe L)
BESTELLMENGE	1 VE = 30 Stück
ART.-NR.	<b>98386</b> (Größe S) <b>98376</b> (Größe L)

## PREMIER CUFFS (DOPPEL-MANSCHETTEN)



HALTBARKEIT	ca. 12 Monate
BESTELLMENGE	1 VE = 1 Stück
ART.-NR.	<b>98371</b> pädiatrisch (305 x 120 mm) <b>98372</b> Erwachsener, Arm (460 x 140 mm) <b>98373</b> Erwachsener, Arm, L (610 x 150 mm)

## SINGLE-USE CUFFS (STERILE EINWEG-MANSCHETTEN)



BESTELLMENGE	1 VE = 10 Stück
ART.-NR.	<b>98370</b> pädiatrisch (75 x 300 mm) <b>98374</b> Erwachsener, Arm (105 x 460 mm) <b>98375</b> Bein, S (105 x 610 mm) <b>98377</b> Erwachsener, Bein (129 x 860 mm) <b>98378</b> Erwachsener, Bein, konisch (129 x 860 mm) <b>98379</b> Erwachsener, Bein, XL (129 x 1.070 mm) <b>98381</b> Erw., Bein, XL, konisch (129 x 1.070 mm)

## SIX-USE DAY CUFFS (SECHSFACH VERWENDBAR)



BESTELLMENGE	1 VE = 10 Stück
ART.-NR.	<b>98332</b> pädiatrisch (305 x 60 mm) <b>98333</b> Erwachsener, Arm, schmal (460 x 75 mm) <b>98334</b> Erwachsener, Arm (460 x 100 mm) <b>98345</b> Bein, S, schmal (610 x 75 mm) <b>98346</b> Bein, S (610 x 100 mm) <b>98335</b> Erwachsener, Bein (860 x 100 mm) <b>98336</b> Erwachsener, Bein, XL (1.070 x 100 mm) <b>98337</b> Erwachsener, Bein, konisch (860 x 100 mm) <b>98338</b> Erw., Bein, XL, konisch (1.070 x 100 mm)

## PREMIER CUFFS (MEHRWEG-MANSCHETTEN)



BESTELLMENGE	1 VE = 1 Stück
ART.-NR.	<b>98361</b> pädiatrisch (305 x 60 mm) <b>98362</b> Erwachsener, Arm (460 x 100 mm) <b>98363</b> Erwachsener, Arm, schmal (460 x 75 mm) <b>98364</b> Bein, S (610 x 100 mm) <b>98365</b> Bein, S, schmal (610 x 75 mm) <b>98366</b> Erwachsener, Bein (860 x 100 mm) <b>98357</b> Erwachsener, Bein, konisch (860 x 100 mm) <b>98367</b> Erwachsener, Bein, XL (1.070 x 100 mm) <b>98368</b> Erw., Bein, XL, konisch (1.070 x 100 mm)

Im Vertrieb durch:



Victoria Höhe 1 • 51645 Gummersbach  
T: 0 22 61/98 91 0 • F: 0 22 61/98 91 111  
[www.nordiska.de](http://www.nordiska.de) • [info@nordiska.de](mailto:info@nordiska.de)

© 2023 nordiska GmbH & Co. KG.  
Konstruktions- und/oder fertigungsbedingt unvermeidbare  
oder erforderliche Änderungen sowie Irrtümer und Druck-  
fehler behalten wir uns auch ohne vorherige Information  
ausdrücklich vor.